


Film adhésif Tegaderm™ Roll - Réf. 18225, 18226, 18227, 7549

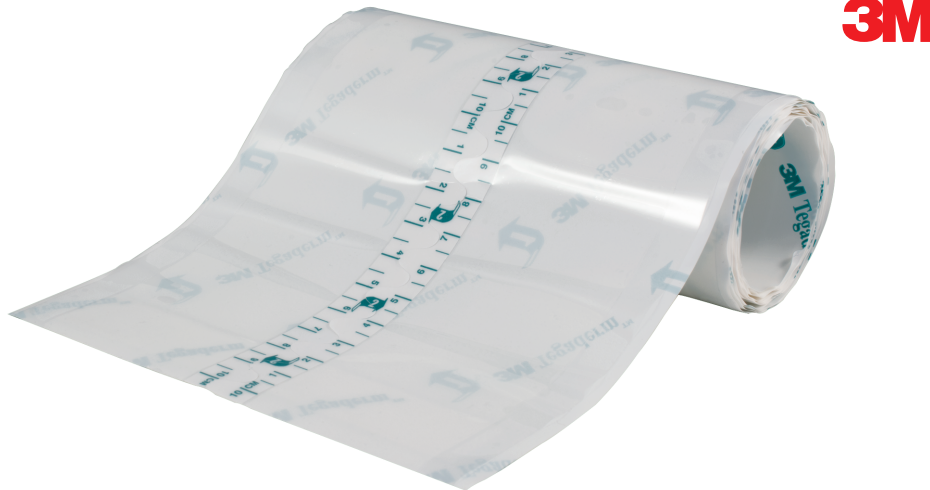

Description

- Pansement secondaire pour soins de plaies, brûlures, ulcères, escarres, etc.
- Protection des plaies en balnéothérapie.
- Protection des peaux fragiles, prévention d'escarres.
- Fixation et maintien sondes, canules, pansements, et de tout dispositif médical où la stérilité du film n'est pas impérative.
- Marquage CE Classe I.
- Ce film adhésif transparent est très souple et résistant, ne laisse passer ni bactéries, ni virus (incluant les virus HIV-1 et HBV), et possède une bonne perméabilité à l'oxygène et à la vapeur d'eau. Imperméable à l'eau, il autorise les douches et les bains¹.
- Son support de pose rend son maniement aisé même avec des gants. Tegaderm™ Roll dispose d'un système de mensuration gradué en centimètres, il peut ainsi être découpé plus facilement aux tailles et formes désirées.

(1 : à condition que le film dépasse d'au moins 3 cm la zone à protéger et qu'il soit parfaitement adhérent à la peau sur tout le pourtour)

Caractéristiques techniques

- **Composition** : - Tegaderm™ Roll ne contient pas de latex ni de colophane ;
- Film polyuréthane, d'une épaisseur inférieure à 25 microns ;
- Support de pose avec règle graduée et liner, en polyéthylène ;
- Adhésif : copolymère d'acrylate hypoallergénique, sensible à la pression.
- **Conditionnement** : Boîte individuelle en papier recyclé (ne contient pas de latex).
- **Origine** : - Lieux de fabrication : toutes les usines sont agréées aux normes ISO 9002 ;
- Brookings Plant, 601 22nd Ave S, Brookings, SD 57006, USA ;
- Valley Plant, 600 East Meigs Street, valley, Nebraska, 68064 USA.
- **Stérilisation** : non stérile.
- **Tests** : - Perméabilité à la vapeur d'eau : 850 g/m²/24 h ;
- Perméabilité à l'oxygène : 2000 cc/m²/24 h ;
- Imperméable à l'eau et aux bactéries ;
- Élongation avant rupture : 757 % ;
- Adhérence à la peau : T0 de 17,2 g/cm et T48 h de 43,6 g/cm.
- **Biocompatibilité** : - Cytotoxicité sur fibroblastes : Minimale (1,5/0,75) ;
- Indice d'irritation primaire : Non irritant (0,0/8,0) ;
- Irritation oculaire aiguë : Non irritant ;
- Test de sensibilisation sous-cutanée (Draize) : Absence d'allergie de contact; adhésif considéré comme hypoallergénique ;
- Irritation cumulative : Pas d'allergie de contact.
- **Précautions d'emploi** : - **Attention : Tegaderm Roll n'est pas indiqué dans la protection directe des sites de ponction vasculaire ;**
- Pour les soins de plaies, notamment les plaies post-chirurgicales il faut interposer une couche stérile (gaze ou autre type de pansement) entre la plaie et Tegaderm Roll.
- Ne pas utiliser en cas d'allergie à un des composants ;
- Ne pas étirer le pansement en le posant au risque de créer des lésions cutanées mécaniques.
Afin d'optimiser son adhérence, Tegaderm™ Roll doit être posé sur une peau parfaitement propre et sèche.
- **Date d'expiration du produit et conservation** : se conserve 3 ans dans des conditions de stockage normales (soit une température moyenne de 10°C à 30°C, avec 30-60% RH).
- **Mode d'élimination** : par incinération.